


快速加热箱式炉- RWF

RWF快速升温箱式炉提供三种规格，最高工作温度可达到1100°C和1200°C。采用全辐射电阻丝和低蓄热量保温材料结合设计，炉膛内可实现快速升温。

标准参数

- | 最高工作温度1100°C和1200°C
- | 炉腔体积5、13和23L
- | 升温至1000°C只需10mins
- | 全辐射电阻丝，提供高效率，确保快速升温
- | 低能耗轻质保温材料，确保高效率和快速升温
- | EPC3016P1可编程控制器
- | Vertical lift door keeps heated surface away from the user
- | Soft closing door protects the thermal insulation
- | 无尘耐磨炉床

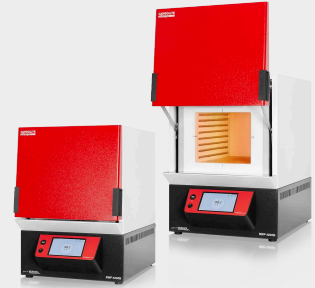

选项(订购时详细标注要求)

- | 一系列具有数字通讯选项的精密数字控制器，多段编程器和数据记录，以及数字通讯接口 - 详情请见控制器介绍
- | 过温保护（推荐保护贵重样品或无人值守的操作）



技术参数

	RWF 11/5	RWF 11/13	RWF 11/23
最高温度 (°C)	1100	1100	1100
加热时间(mins)	10	11	13
最高持续工作温度	1000	1000	1000
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
尺寸: 炉门开启时外部尺寸 高 x 宽 x 纵深 (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
体积 (L)	5	13	23
最大功率 (W)	2750	5000	9100
持续功率 (W)	680	1200	1800
热电偶种类	K	K	K
重量 (kg)	28	45	65

	RWF 12/5	RWF 12/13	RWF 12/23
最高温度 (°C)	1200	1200	1200
加热时间(mins)	12	13	15
最高持续工作温度	1100	1100	1100
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
尺寸: 炉门开启时外部尺寸 高 x 宽 x 纵深 (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
体积 (L)	5	13	23
最大功率 (W)	2750	5000	9100
持续功率 (W)	820	1450	2100
热电偶种类	R	R	R
重量 (kg)	28	45	65

请注意

升温速率是在温度设定于最高温以下100°C，空载运行的情况下测量。

保温功率是在连续工作条件下测量。

最大功率和加热时间都基于240V电源

均温区容积小于烘箱总容积。

www.carbolite-gero.cn/rwf