




RWF - CUPTOARE CU CAMERĂ CU ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

Cuptoarele tip camera cu incalzire rapida, RWF, sunt disponibile in trei variante de dimensiuni ale camerelor cu temperaturi maxime de operare de 1100°C sau 1200°C. Rezistoarele bobinate cu radiație liberă, în combinație cu izolația cu masă termică redusă, sunt proiectate să asigure transferul termic rapid in camera cuptorului.

CARACTERISTICI STANDARD

- | Temperatura maxima de operare: 1100°C, 1200°C
- | Volume de cameră disponibile: 5, 13, 23 litri
- | Ajunge la 1000°C (de la temperatura ambientala) in cel mult 10 minute
- | Transfer termic rapid de la rezistoarele cu bobinate cu radiație liberă
- | Izolație cu transfer termic redus pentru eficiență energetică ridicată
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Vertical lift door keeps heated surface away from the user
- | Soft closing door protects the thermal insulation
- | Vatra cuptorului rezistentă la uzura

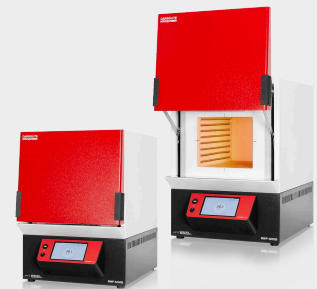

OPȚIUNI (SPECIFICAȚI OPȚIUNILE ÎN MOMENTUL EFECTUĂRII COMENZII)

- | Gamă de sisteme de control digitale sofisticate, fiind disponibile opțional programe cu segmente multiple și înregistrare de date cu opțiune de transmitere digitală - mai multe informații despre sistemele de control disponibile
- | Protecție la supra-temperatură (recomandată pentru protejarea conținutului de valoare și pentru funcționarea nesupravegheată)



DETALII TEHNICE (MODELE)

	RWF 11/5	RWF 11/13	RWF 11/23
Temp. max. (°C)	1100	1100	1100
Timp de încălzire (min.)	10	11	13
Temperatura max. de operare continuă (°C)	1000	1000	1000
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Dimensiuni: Externe cu ușa deschisă H x W x D (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Volum (litri)	5	13	23
Putere max. (W)	2750	5000	9100
Putere de lipire (W)	680	1200	1800
Tip termocuplu	K	K	K
Greutate (kg)	28	45	65

	RWF 12/5	RWF 12/13	RWF 12/23
Temp. max. (°C)	1200	1200	1200
Țimp de încălzire (min.)	12	13	15
Temperatura max. de operare continuă (°C)	1100	1100	1100
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Dimensiuni: Externe cu ușa deschisă H x W x D (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Volum (litri)	5	13	23
Putere max. (W)	2750	5000	9100
Putere de lipire (W)	820	1450	2100
Țip termocuplu	R	R	R
Greutate (kg)	28	45	65

Vă rugăm să rețineți

- rata de încălzire este măsurată la 100°C sub temperatura maximă, folosind o cameră goală
- puterea de lipire este măsurată în funcție de temperatura de operare continuă
- Putere maximă și timpi de încălzire pe baza unei alimentări de 240V
- Valoarea uniformă este mai mică decât volumul total al camerei

www.carbolite.com/rwf