



RWF - SNELVERWARMENDE KAMEROVEN

De snel verwarmende RWF kamerovens zijn beschikbaar in drie kamerformaten met maximale bedrijfstemperaturen van 1100°C of 1200°C. De vrij warmtestralende draadelementen in combinatie met een isolatie van lage thermische massa zijn ontworpen om de binnenkamer snel op te warmen.


STANDAARD FUNCTIES

- | Maximale bedrijfstempertuur van 1100°C of 1200°C
- | 5, 13 of 23 liter kamervolume
- | Van kamertemperatuur tot 1000°C in slechts 10 minuten
- | Snelle opwarming dankzij de vrij stralende warmte elementen
- | Lage thermische massa isolatie voor hoge energie efficiëntie
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Vertical lift door keeps heated surface away from the user
- | Soft closing door protects the thermal insulation
- | Duurzame, robuuste bodemplaat



OPTIES (TE SPECIFIËREN BIJ BESTELLING)

- | Een reeks gesoftisticeerde digitale controllers, multisegment sturingen en data loggers met digitale communicatie opties is beschikbaar - meer informatie over controllers
- | Overtemperatuurbeveiliging (aanbevolen om waardevolle inhoud te beschermen & voor onbewaakte werking)

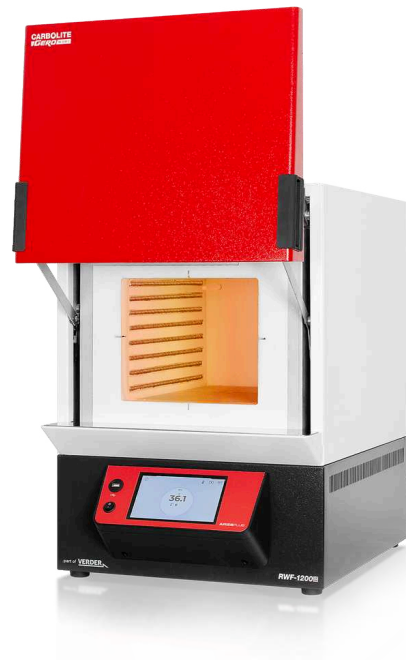

TECHNISCHE DETAILS (MODELLEN)

	RWF 11/5	RWF 11/13	RWF 11/23
Max temp (°C)	1100	1100	1100
Opwarmtijd (min)	10	11	13
Max doorlopende gebruikstemp (°C)	1000	1000	1000
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Afmetingen: Extern met deur open H x W x D (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Volume (liter)	5	13	23
Max vermogen (W)	2750	5000	9100
Werkvermogen (W)	680	1200	1800
Thermokoppel type	K	K	K
Gewicht (kg)	28	45	65

	RWF 12/5	RWF 12/13	RWF 12/23
Max temp (°C)	1200	1200	1200
Opwarmtijd (min)	12	13	15
Max doorlopende gebruikstemp (°C)	1100	1100	1100
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Afmetingen: Extern met deur open H x W x D (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Volume (liter)	5	13	23
Max vermogen (W)	2750	5000	9100
Werkvermogen (W)	820	1450	2100
Thermokoppel type	R	R	R
Gewicht (kg)	28	45	65

Opgelet

- Opwarmingssnelheid wordt gemeten tot 100°C onder max, in een lege kamer
- Doorlopend vermogen wordt gemeten bij constante temperatuur
 - Maximum vermogen en opwarmingstijden gebaseerd op een 240V voorziening
 - Het uniforme volume is kleiner dan het totale volume van de kamer

www.carbolite.com/rwf